

FONA
CLOSER TO YOU



FIABILIDAD PROBADA
Miles de unidades instaladas en todo el mundo proporcionan a diario imágenes perfectas.

FONA X70

EXCELENTE CALIDAD DE IMAGEN
Su punto focal extremadamente fino, de tan solo 0,4, se traduce en una calidad de imagen excelente.

FONA XDG

FONA X70

Diseñado pensando en su facilidad de uso, calidad de imagen estable y durabilidad, el FONA X70 es una solución ideal y económica para su clínica dental.

Su corrección automática de las fluctuaciones en la tensión de la red, la protección integral contra sobrecalentamientos del tubo con un preciso procedimiento de enfriamiento y sus funciones de seguridad optimizadas con mensajes selectivos de alarma y el temporizador de refuerzo hacen de FONA X70 un aliado fiable que le acompañará durante muchos años.



Calidad de imagen estable

Su poder de penetración de 70 kV y su microprocesador regulado con temporizador garantizan un buen contraste de imagen y un ennegrecimiento consistente de la película.




Uso intuitivo

Ajuste automático de los tiempos de exposición desde 60 ms a 3,2 s, en función del tipo de pieza dental y altura del paciente seleccionados.



Fiabilidad probada

La protección contra el sobrecalentamiento del tubo hace que la unidad tenga una larga vida útil, lo que hace que sea una inversión segura.

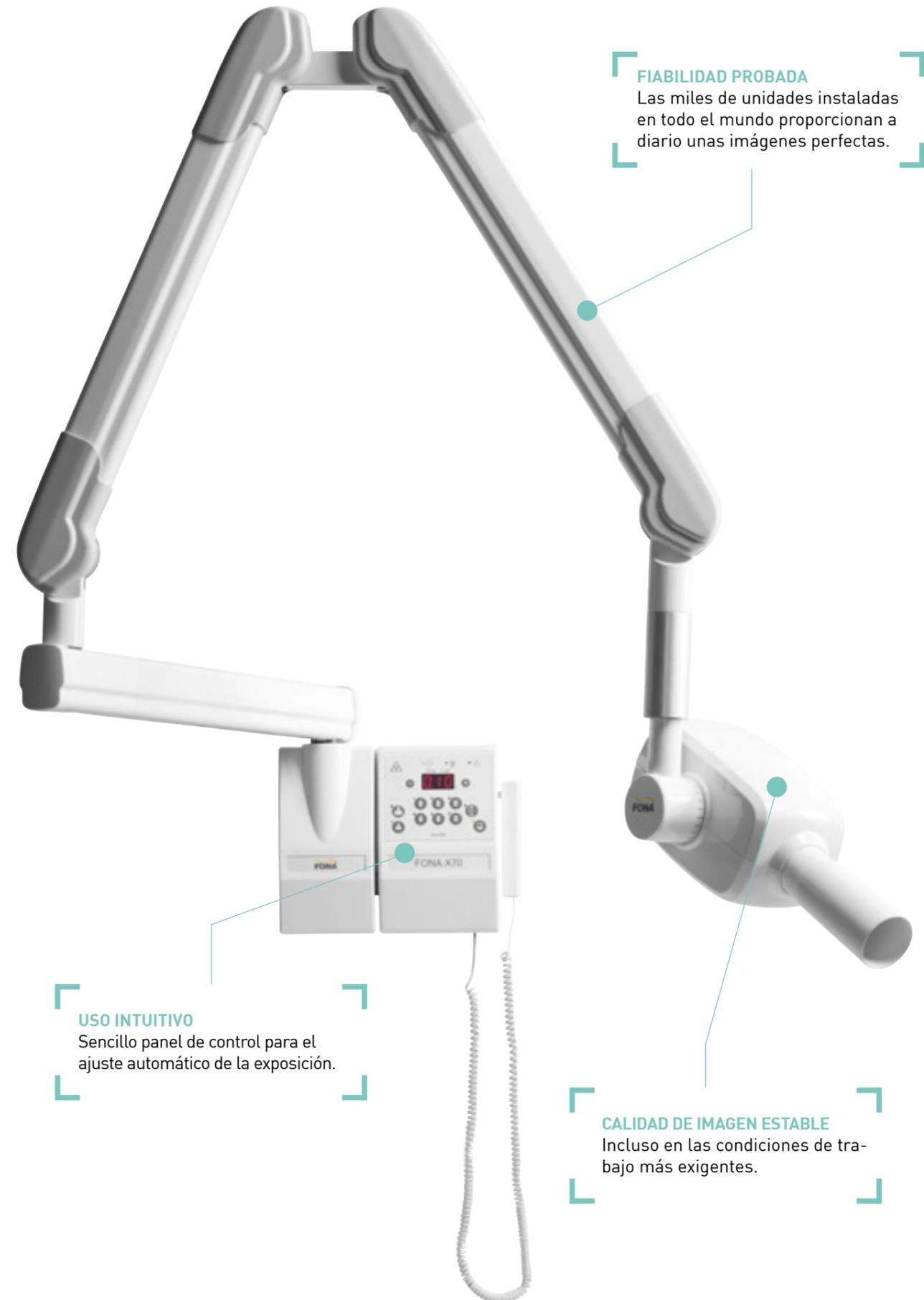

FIABILIDAD PROBADA

Las miles de unidades instaladas en todo el mundo proporcionan a diario unas imágenes perfectas.

USO INTUITIVO

Sencillo panel de control para el ajuste automático de la exposición.

CALIDAD DE IMAGEN ESTABLE

Incluso en las condiciones de trabajo más exigentes.

Opciones



Escoja entre 4 longitudes diferentes de brazo extensible para que la unidad intraoral se adapte perfectamente a su consulta.



El dispositivo rectangular de limitación del haz de FONA permite una reducción significativa de la dosis emitida.



Colimador de 20 cm o de 30 cm.




La configuración móvil es la opción ideal para consultas que buscan la máxima flexibilidad operativa.




Con su cable de 10 m de longitud, el interruptor manual remoto se puede instalar fácilmente donde se requiera.

Especificaciones técnicas

	FONA X70
Generador	Corriente alterna (CA)
Punto focal	0.8 (IEC 336/1997)
Voltaje del tubo, corriente del tubo	70 kVp, 7 mA
Voltaje de línea	120/230 V, 50/60 Hz
Distancia foco-piel	Estándar de 21 cm
Tiempo de exposición	60 ms - 3,2 s
Alturas de paciente	Adulto, niño
Accesorios opcionales	7

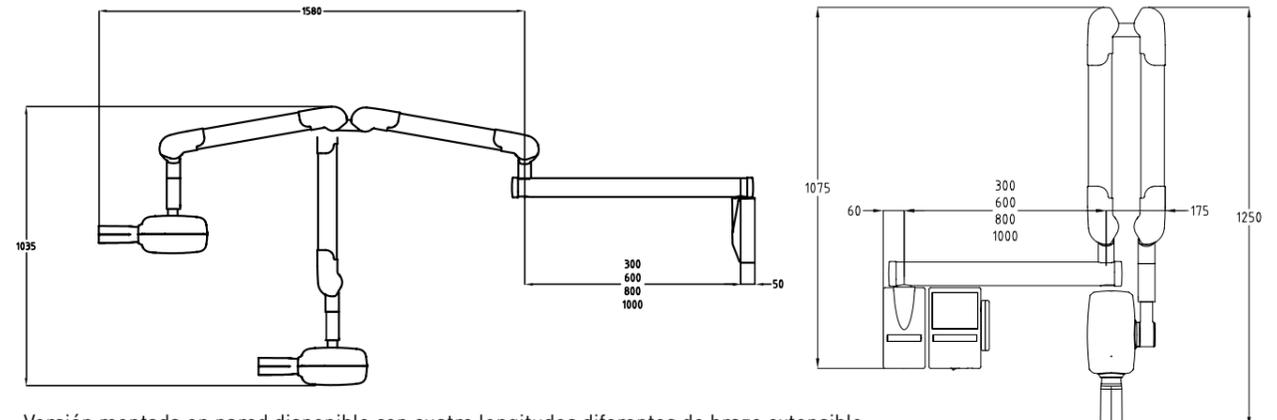

Versión montada en pared disponible con cuatro longitudes diferentes de brazo extensible: 30 cm, 60 cm, 80 cm y 100 cm

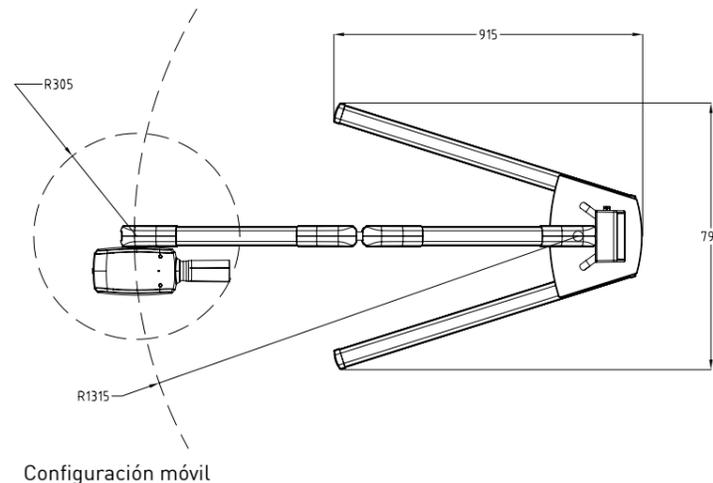

Configuración móvil

